


**PROFI CARE®**

**Kasutusjuhend**



**Pooride puhastaja PC-PR 3025**

## Ülevaade seadme detailidest

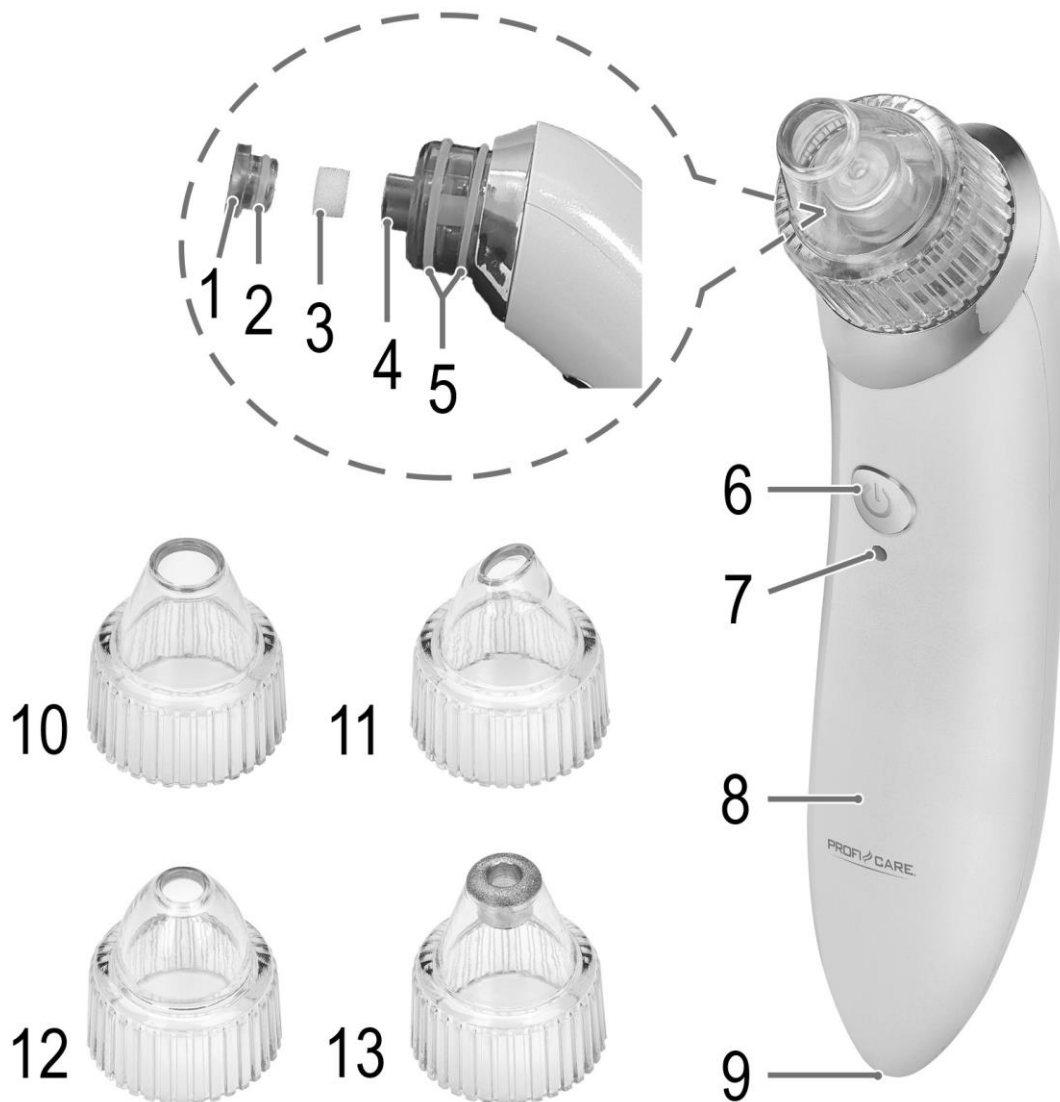

### Ülevaade seadmest

1. Sulgur
2. Väike tihendrõngas
3. Käsfilter
4. Käsfiltri avaus
5. Suud tihendrõngas
6. Sisse / välja lüüti
7. Märkutuli
8. Seade
9. Ühenduspesa
10. Tarvik nähtavalt suurte pooride vähendamiseks; aitab kaasa rasu ja rasupunnide eemaldamisele.

11. Tarvik muudab naha siledamaks, tugevamaks ja tihedamaks.
12. Pooride puhastamise tarvik.
13. Tarvik õrnaks koorimiseks; eemaldab plekid ja nahaosad.

### Pildilt puudub:

- Toiteadapter
- Laadimisjuhe (A tüüp USB-st Mikro B USB-sse)

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

#### **HOIATUS:**

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

#### **ETTEVAATUST:**

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Toiteadapter sobib kasutamiseks ainult kuivas ruumis.
- Kontrollige, et toiteadapteri väljundvool, pinge ja polaarsus vastavad ühendatud seadmel olevatele näitajatele!
- Ärge katsuge ühendatud toiteadapterit märgade kätega!
- Puhastamiseks lahutage seade toiteadapterist.
- Veenduge, et toiteadapteri juhe ei oleks väärdunud, millegi all kinni, tõmmatud üle või kontaktis kütteseadmetega.
- Ärge kasutage kahjustatud toiteadapterit.
- Ärge hakake seadet ise parandama.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

#### **HOIATUS:**

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. **Lämbumisoht!**

## Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



### **HOIATUS** **elektrilöögi eest:**

- Hoidke seadet kuivas!
  - Hoidke toiteadapterit kuivana.
  - Ärge laadige seadet vanni, valamuga ega muude veenõude läheduses.
  - Laadige seadet jahedas ja kuivas kohas.
  - Seade on loodud eriti madala pingega kasutamiseks. Ühendage toide ainult vastavalt nimiplaadil olevale spetsifikatsioonile .
  - Kui kaasasolev toiteadapter on kahjustatud, tuleb see lasta tootjal või hooldusel välja vahetada samasuguse vastu.
  - Ärge vahetage ega muutke osi. Ärge tehke mingeid muudatusi.
- Elektrilöögi oht!

#### **HOIATUS: Vigastuse oht!**

Kehavigastuste vältimiseks lugege enne seadme kasutamist märkusi.

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 12-aastastele lastele, füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega ja/või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelvalveta.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit.

## Sisseehitatud aku eriline ohutusteave

### △ ETTEVAATUST:

- Seade sisaldab liitiumioonakut, mida kasutaja **ei tohi** asendada.
- Aku ebaõigel vahetamisel on plahvatuse oht! Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse akuga.
- Ärge avaldage akule tugevat survet. Ärge pillake seadet!
- Ärge hoidke seadet kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes. Hoidke seade eemal soojusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud jms.
- Keskkonna temperatuur peaks jääma vahemikku 0 °C ja 35°C. Kuumus kahjustab akut. Äärmuslikult madalad temperatuurid vähendavad aku mahtu ning lühendavad aku kasutusaega.
- Ärge laadige akut järelvalveta.
- Kui laadimine on lõppenud, võtke toitejuhe pistikupesast.

### Pakendi sisu

- 1 x seade
- 4 x tarvikud
- 4 x väike tihendirõngas (1 juba paigaldatud)
- 5 x suur tihendirõngas (2 juba paigaldatud)
- 17 x käsfilter (1 juba paigaldatud)

### Märkused kasutamiseks

#### Milleks seadet kasutada?

Seade sobib kasutamiseks näonahal (peale silmade ja huulte ümbruse ala) Kuna aastate möödudes muutub epidermise kiht väliste mõjude tõttu õhemaks, muutuvad naha struktuur ja kahjustused märgatavamaks. See seade on välja töötatud selleks, et vältida esimesi näonaha vananemise nähte. Kasutage seadet näonaha puhastamiseks, koorimiseks ja masseerimiseks. Regulaarsel kasutamisel on võimalik saavutada parem jume.

#### Mida peaks meeles pidama seadme kasutamisel?

- Ärge kasutage seadet tarvikuta.
- Kontrollige tarvikut enne igat kasutamist. **Ärge** kasutage kahjustatud, katmise või musta tarvikuga seadet. Kahjustatud tarvik võib nahka kahjustada.

- Naha või seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage koos seadmega kreeme, keemilist või mehaanilist koorimist.
- Kasutage seadet maksimaalselt kaks korda nädalas. Sagedasem kasutaja võib põhjustada nahaärritust.
- Ärge kasutage seadet liiga pikalt, et nahka kaitsta. Esimeste nahaärrituste ilmnmisel katkestage kohe kasutamine.
- On **oluline**, et seade oleks pidevalt liikudes vastu nahka ja seda ei hoitaks ühel kohal. Sellisel viisil väldite naha ärritamist ja sinikate tekkimist.
- Ärge kasutage seadet kui nägu on märg, vannis või dušši all.
- Naha uuenemise kiirendamiseks kasutage seadet ainult välimise surnud nahakihi õrnaks eemaldamiseks.
- Peale seadme kasutamist imenduvad kreemid ja maskid paremini. Siiski võivad tekkida negatiivsed nahareaktsioonid. Soovitame esimese 2-4 nädala vältel kreemi mitte vahetada. Kui kasutate selle perioodi vältel uut kreemi, testige seda enne väikesel alal. Kui seadme kasutamisel ilmnevad nahaärritused, ärge selle kreemi kasutamist jätkake. Alustage või jätkake seadme kasutamist mitte varem kui 2 nädala pärast.

- Kui te kavatsete päikest nautida (nt suvepuhkuse ajal), soovitame lõpetada seadme kasutamine nädal enne puhkust ja nii kaua, kui olete päikese käes.
- Soovitatav on kasutada päikesekaitsetooteid vähemalt 3 päeva pärast iga kasutamist (minimaalse päikesekaitse faktoriga 30)

### Millal ei tohiks seadet kasutada?

Seadme mitte kasutamine on soovitatav järgmistel juhtudel:

- Lahtised haavad, lööbed, nahainfektsioonid, psoriaas, ekseem, põletikud, päikesepõletused, põletushaavad, roosvistrikud, aktiivsed infektsioonid (nt aktiivne akne või herpes), ravitavatel aladel;
- Kui teie nahk taastub kosmeetilisest protseduurist, näiteks keemilisest või mehaanilisest koorimisest, laserlihvimisest, osalisest laserravist, mesoteraapiast või muust naha täiteainetega ravist viimase kahe nädala jooksul;
- Maksaplekkide, püsiva meigi, suurte moolide või sünnimärkide, tätoveeringute või muude nahaärrituste korral ravitavates piirkondades;
- Koos teiste kodus kasutatavate nahahooldussüsteemidega, mis sisaldavad aktiivseid koorimisvahendeid.
- Kui teil on tüükad, ärge püüdke neid seadmega eemaldada. See võib põhjustada tüüka edasilevimise.
- Seadmega ei tohi ravida suuri mädaseid vistrikke ega koeralaelu.
- Rasedad naised ja südamehaigusega inimesed ei tohiks seda seadet kasutada.
- Kosmeetilise kirurgia läbinud inimesed ei tohiks seadet opereeritud piirkondades kasutada.
- Seadet ei tohi kasutada intiimpiirkonnas.


### Millal on vajalik meditsiiniline nõustamine?

Enne seadme kasutamist konsulteerige arstiga järgmistel juhtudel:

- Kui teil on armid;
- Kui te võtate ravimeid, mis mõjutavad nahka, nagu steroidid või akne ravimid (Accutan, Isotretinoin või Roaccutan);

- Kui teil on oluline nahahaigus (sealhulgas, kuid mitte ainult, melanoomid, basaalkrakude kartsinoom, aktiivne keratoos, melasma, süsteemne erütematoosne luupus, porfüüria, koagulatsiooni ebanormaalsus ja kollageeni kõrvalekalded, nagu keloidid, liigne cicatrization või halb haavade paranemise eelnev ajalugu).

### ON / OFF lüliti

Vajutage sisse/välja lülile , et valida imemise võimsustase.

Kuuenda klahvivajutusega lülitate seadme välja.

Klahvivajutus	Märgutuli	Tase
1 x	süttib	1
2 x	vilgub 2 x	2
3 x	vilgub 3 x	3
4 x	vilgub 4 x	4
5 x	vilgub 5 x	5
6 x	väljas	väljas

### Märgutuli

Märgutule värvide tähendused on järgmised:

- Punane = Laadimine
- Roheline = Laadimine on lõppenud
- Sinine = Kasutusrežiim, taseme reguleerimine

### Akude laadimine

#### **!**MÄRKUS:

Seade on varustatud ületühjenemise kaitsega.

See lülitab seadme välja, kui toimimiseks vajalik laadimistase ei ole enam piisav.

1. Sisestage laadimisjuhe toiteadapterisse.
2. Ühendage adapteri toitejuhe seadme pistikupesasse.
3. Ühendage toiteadapteri pistik seinakontakti. Enne esimest kasutamist laadige 2.5 tundi.

#### **!**MÄRKUS:

- Laadimise ajal põleb punane laadimise märgutuli.
- Laadimise lõppedes muutub laadimise märgutuli roheliseks.
- Otse võrgus kasutamine ei ole võimalik.
- 4. Lahutage toiteadapter kontaktist kohe kui aku on täielikult laetud.

### **!MÄRKUS:**

Isegi kui seade on välja lülitatud, toimub pidev aku tühenemine. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, laadige akut iga 4-8 nädala järel.

### **Seadme kasutamine**


#### **⚠ HOIATUS: Vigastuse oht!**

- Seadet esmakordselt kasutades testige tarvikut kaenla all, enne kui seda näol kasutate. Liigutage seadet piki kätt ning oodake umbes tund aega. Kui nahareaktsiooni ei järgne, võite seadet näol kasutada.
  - Ärge kasutage seadet silmade ümbruses! Kui ravite silmade kõrval olevaid peeneid jooni, katke silmalaug teise käe sõrmega ja liigutage seadet sõrmest eemale.
  - Vältige huultel ja otse nina all kasutamist. (valulik)
  - Alustage kasutamist madalaimast imemistasemest! Liiga tugev imemine võib põhjustada verevalumi. Suurendage imemistugevust sujuvalt.
  - Ärge hoidke seadet vastu nahka vahetult peale seadme sisselülitamist!
1. Enne igat kasutamist puhastage ja kuivatage nägu. Pooride avamiseks võite teha näole kuuma auru või hoida näol sooja, niisket rätikut.
  2. Pange soovitud tarvik seadmele. Veenduge, et tihendrõngas ei libise.
  3. Lülitage seade ON/OFF lülitist sisse. Vajadusel valige teine imemistase.
  4. Puudutage nägu tarvikuga selliselt, et tunnete imemise mõju. Ärge suruge tarvikut liiga tugevalt vastu nahka ning ärge hoidke seda ühel kohal! Liigutage tarvikut otse ühes suunas. Töödelge

kõiki piirkondi peale silmade ümbruse. Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas seadet igas piirkonnas liigutada:

- **Lõug:** Keskelt väljapoole
- **Põsed:** Ninasõõrmetest kõrvade poole
- **Laup:** Keskelt väljapoole
- **Nina:** Ülevalt alla ja piki ninasõõrmeid
- **Kõrvade juures:** Piki meeleskohta alt üles

### **!MÄRKUS:**

- Mõnedes piirkondades on nahaga täieliku kontakti loomine raskem. Püüdke hoida seadet teisiti. Liigutage seadet vertikaalselt või horisontaalselt või pöörake oma pead, et parandada kontakti nahaga.
  - Pärast kasutamist võib nahk punetada. See on normaalne ja (sõltuvalt naha tüübist) peaks kaduma mõne tunni jooksul.
5. Kui soovite kasutamise lõpetada, lülitage seade ON/OFF lülitist  välja.
  6. Peale kasutamist peske nägu külma veega, et poorid uuesti sulgeda. Lõpuks kasutage päikesekaitsega hooldustoodet.

### **Käsnfiltrite vahetamine**

Tutvuge palun joonisega.

### **!MÄRKUS:**

Pöörake tähelepanu tihendusringaste õigele paigaldamisele.

1. Eemaldage tarvik.
2. Eemaldage sulgur.
3. Eemaldage must filter pintsettidega ja sisestage uus.
4. Pange sulgur ja tarvik tagasi.

## Puhastamine

### ⚠ HOIATUS:

- Enne seadme puhastamist lülitage seade välja. Lahutage toiteadapter vooluvõrgust.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!
- Ärge asetage adapterit vette.

### ⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge puhastage seadet voolava vee all. Vastasel korral võite elektroonikat kahjustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Puhastage korpus vajaduse korral kergelt niiske pehme lapiga.
- Puhastage toiteadapterit alati kuiva lapiga.
- Puhastage tarvikuid pehme pesuvahendiga. Lõpuks loputage need veega. Enne uuesti kasutamist laske kõikidel osadel täielikult kuivada.

### ℹ MÄRKUS:

Soovitame tarvikuid puhastada müügiloleva desinfitseerimisvahendiga.

- Käsniitrit võite puhastada sooja voolava veega. Enne uuesti kasutamist laske filtril täielikult kuivada. Kui käsniitrit on väga määrduanud, vahetage see välja.

### Hoidmine

- Soovitame hoida seadet originaalpakendis, kui te seda pikemat aega ei kasuta. Enne seadme hoiustamist eemaldage aku.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

### Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Toiteadapter on ühendatud.	Lahutage seadme toide.
	Aku on kahjustatud.	Võtke ühendust hoolduse või maaletoojaga.
Laadimise ajal seade ei tööta.	Otsene toide läbi vooluvõrgu ei ole võimalik.	Laadige seadet umbes 2.5 tundi.
Optimaalseid tulemusi ei saavutata.	Seadet kasutati märjal/niiskel nahal.	Kuivatage nägu enne igat kasutamist.
Nahk hakkab punetama ja läheb paiste pikemaks ajaks.	Hoiate seadet liiga tugevalt vastu nahka.	Järgmisel korral suruge vähem.
	Kasutate seadet ühes piirkonnas liiga pikalt.	Ärge kasutage seadet ühes piirkonnas liiga pikalt.
Seade ei ole nahaga täielikus kontaktis.	Mõnedes piirkondades on nahaga täieliku kontakti loomine raskem.	Püüdke hoida seadet teisiti. Liigutage seadet vertikaalselt või horisontaalselt või pöörake oma pead, et parandada kontakti nahaga.

## Tehnilised andmed

Mudel ..... PC - PR 3025  
Netokaal: ..... Umbes 148 g  
Kaitseklass: ..... III  
Sisend ..... DC 5.0 V, 1000 mAh

### Toiteadapter

Kaitseklass: ..... II  
Sisend: .... AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0.3 A  
Väljund ..... DC 5.0 V, 1000 mAh  
**Aku** ..... 1 x 3,7 V 500 mAh Li-Ion  
Tööaeg ..... 45 minutit (max.)  
Laadimisaeg ..... ligikaudu 2,5 h

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine

### Patareide / akude hävitamine



Seadmel on aku. Kasutatud akud/patareid ei kuulu olmeprahi hulka. Patareid / akud tuleb enne toote äraviskamist eemaldada.

Pidage nõu kvalifitseeritud personaliga Täpsemat teavet akude / patareide utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.

### “Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.