



- Negatiivsete ionide sisseviimine
- vibratsioonimassaaž
- Sinine valguslaine

Patenteeritud toode, võltsingut jälitatakse

Patent Nr : 201530271409.2 / 201520648242. 1

Sissejuhatus

Elegantse välimusega multifunktsionaalne silmahooldusseade, mis pakub teile intiimset silmahooldust. Silmahooldusseade silmaümbruse kortsude, lõtvunud silmalaugude, tumedate ringide ja muude silmaprobleemide jaoks. Massaažifunktsioon leevendab silmade pinget. Kasutage koos silmakreemiga, et see paremini imenduks.

Põhifunktsioon ja toime

Infrapuna valguslaine: Soojendava efektiga 580~630nm, sõltumatu lüliti, automaatne väljalülitumine 3 minuti järel.

Iontoforees põhineb galvaanilisel voolul ning kasutamisel võimaldab aktiivainetel paremini nahka tungida. Imenduvuse suurendamiseks kasutada koos essentsiga.

Mikrovibratoorne massaaž/sinine laine: instrumendi sisse on ehitatud mikrovibratsioonimootor, mis tagab suure kineetilise energia kiirusel 7000 p/min. Vibratsioonimassaaž ja sinine laine aktiveeritakse kontaktinduktsiooniga.

Kuus peamist omadust



Induktsioonlüliti mikrotremor, valguskäivitusfunktsioon



Multifunktsionaalne komposiitkasutus



Sisseehitatud suure võimsusega akud, keskkonnasõbralikud, iga laadimisega pikem kasutusaeg



Universaalne USB laadimispesa, DC 5 V pinge on mugav ja praktiline




Mitmeotstarbeline kolmemõõtmeline hoidik



Humaniseeritud massaaži tugevus, professionaalne silmahooldus

Osa nimi

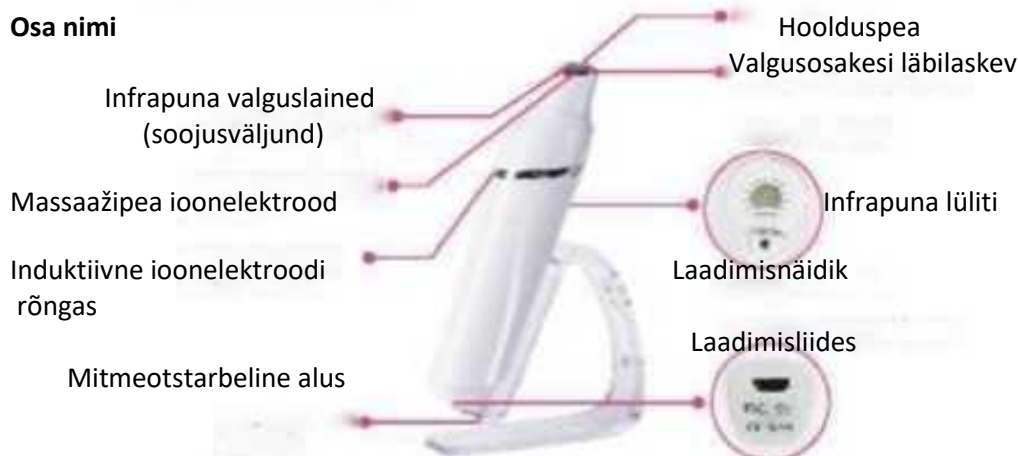

Kasutusjuhend



Samm 1: Pärast naha puhastamist määrige silmaümbruskreem või -kreem ühtlaselt silmaümbrusele.

Samm 2: võtke seade välja, puudutage sõrmega dekoratiivrõngast, sulgege silmad ja lõdvestuge. Seadme pea puutub vastu hooldatavat ala, ioonid moodustavad ahela, käivitub ionide impordirežiim. Sama ajal võite kogeda kiiret mikrovibratsioonimassaaži, blue-ray funktsioon on avatud, lastes nautida sissejuhatust, massaaživalgus võib tunduda pisut sinakas, muutes inimese õnnelikuks.

Samm 3: Vajutage infrapunanuppu. Infrapuna funktsioon avaneb, võite võtta sõrmeioonrõngalt, sulgege silmad ja korrake toimingut mõlemal silmal ühe minuti. Vastavalt isiklikele eelistustele võite seda teha samaaegseltioonmassaažiga, nautige uut kuuma kehatunnet ja maagilistioonhooldust.



Ninast silmanurgani

Silmanurgast juuksepiirini

Vajutage seadme rulli
ümbersilma

Pärast lõpetamist lülitage infrapunalüliti kohe välja. (ja puhastage seadme pea järgmiseks kasutamiseks). Soovitatav on kasutada üks kord hommikul ja öhtul üks kord, kasutades korraga 3–5 minutit.

Näpunäide silmahoolduseks

Iga 2 tunni töötamise järel laske silmadel mõni minut puhata, vaadates kaugusesse, seejärel sulgege silmad viieks minutiks, laske silmadel täielikult lõõgastuda.

Niisutage silmi, vähendage hilist ärkvelolekut, magage piisavalt, tehke rohkem trenni, nahk muutub kindlasti paremaks.

Tehnilised andmed

Laadimispinge	DC 5 V	Aku pinge	DC 3,7 V
Laadimisvool	500 MA	Aku maht	800 mAh
Võimsus	1,3 W	Kiirgava valguse värvid	Sinine valgus / Punane valgus
Kiirus	7000 rpm	Laadimisaeg	2~3 tundi
Temperatuur	40~45°C	Kasutusaeg	2~3 tundi
Toote suurus	130x32x30 mm	Netokaal	84 g

Pange tähele

- * Pange tähele: ärge kasutage meie tootega eeterlikku õli.
- * Palun ärge peske seadet
- * Ärge võtke seda ise lahti
- * Ärge lööge tugevalt ega laske maha kukkuda
- * Ärge kasutage, kui teie silmad on haiged
- * Ärge kasutage, kui teile on hiljuti tehtud silmaoperatsioon
- * Ärge kasutage, kui pärast operatsiooni on nägu turses

Vaatamata sellele, et nahka ei puudutata, tõuseb peale punase valguskiirguse avanemist temperatuur. Kui te ei kasuta seadet üle kahe minuti, puudutage enne kasutamist esmalt sõrmega seadme pead, et veenduda temperatuuri sobivuses.