


SENCOR

Let's live!

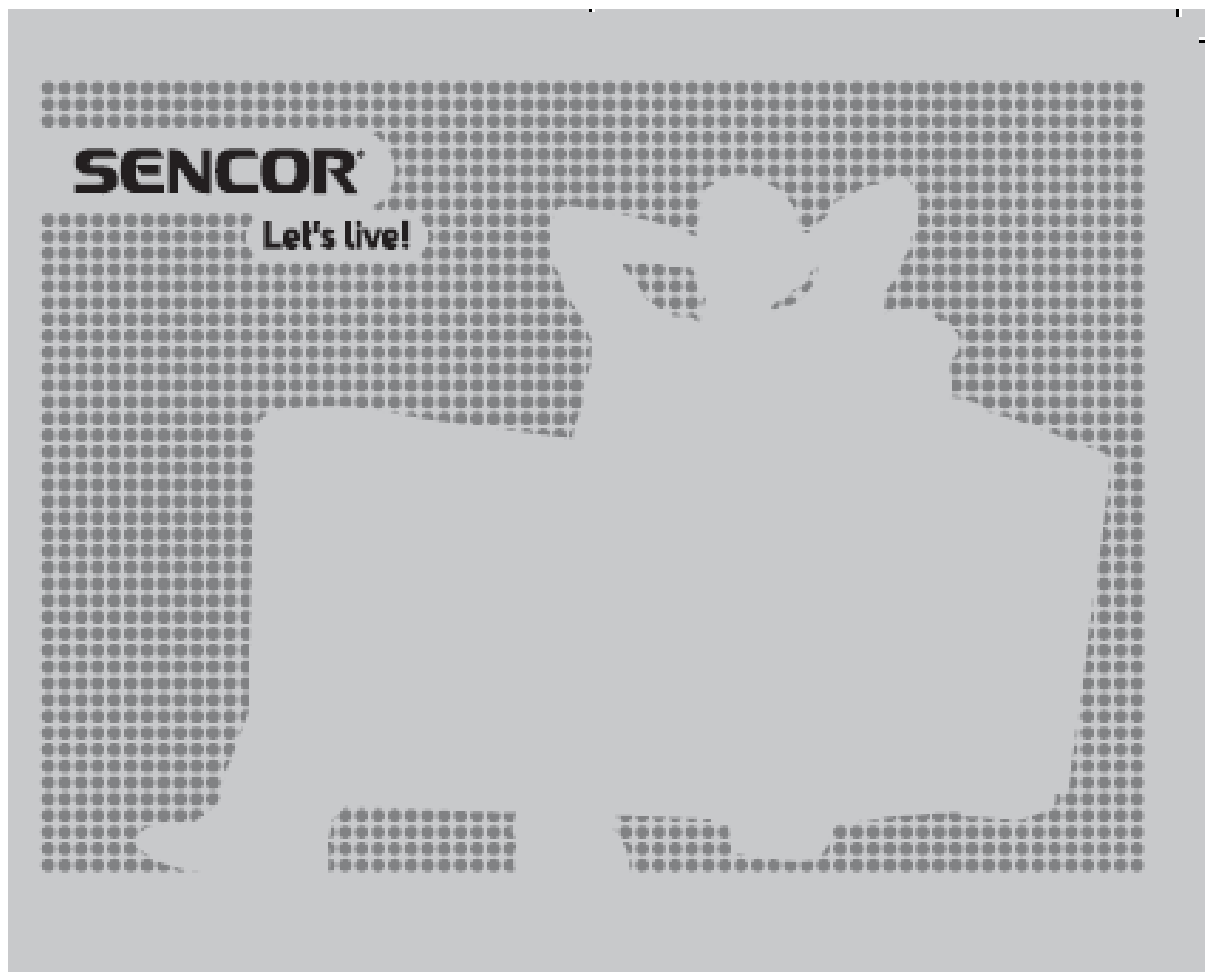

SCA BA50FC

**Professionaalne alkomeeter
KASUTUSJUHISED**

1. Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend ja mõistke seadme ohutusmeetmed ja üksikasjalikke kasutusjuhiseid. Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles. Kui müüte seadet, ärge unustage anda seadme ja selle lisaseadmete uuele omanikule kasutusjuhendit.

OLULISED OHUTUSJUHISED!!!

Vahetult pärast alkoholitarbimist või 15 minuti jooksul pärast alkoholi tarvitamist võib alkoholitarbija kahjustada tuvastusandurit ja on oht, et mõõtmised on tulevikus ebatäpsed. Seadme asjatundmatut kasutamist garantii ei kata.

Soovitame seadet hoida ning kasutada toatemperatuuril. Seadme kasutamine ning säilitamine teistel temperatuuridel võib mõõtetäpsust mõjutada.

Ärge sooritage testi tugeva tuulega ega suletud ruumis, kus on sigaretsuitsu ning alkoholiaurusid.

- Kui ekraanile ilmub tühja aku sümbol, laadige seade.
- Ärge puhuge huulikusse suitsu, toitu ega vedelikke.
- Kasutades seadet keskkonnas, mis jääb kindlaksmääratud piiridest väljapoole, võib see põhjustada seadme kahjustuse ja ekslikke tulemusi.
- Alkoholi tase hingeõhus sõltub paljudest asjaoludest ning muutub ajaga.
- Tase võib muutuda juba mitu minutit pärast esialgset testi.
- Selle seadme mõõtmistulemusi ei saa kohtumenetluses kasutada tõendusmaterjalina.
- Selle seadmega saadud teave on informatiivne.
- Soovitame, et seda ei kasutata otsuste tegemiseks vastutust nõudva tegevuse suutlikkuse hindamisel. Mõõteväärtust võivad mõjutada mitmed asjaolud (nt. maagaasi jäägid, suits ja ebasoovitav hingeõhk).
- Ärge juhtige ise ega lubage kellelgi teisel autot juhtida pärast alkoholi tarbimist.
- Kui te olete alkoholi tarbinud, organiseerige alati kaine autojuht või kasutage alternatiivset transpordiliiki.
- Ei maaletooja ega tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme ettevaatamatu käsitlemine.


ÄRGE TARBIGE KUNAGI ALKOHOLI KUI PLAANITE JUHTIDA MOOTORSÕIDUKIT!!

2. Mõõtmine


- SCA BA50FC personaalne alkotester on professionaalne alkoholianalüsaator. Kuna elektrokeemilise sensori kütuseelement kasutab plaatina elektrokeemilist reaktsiooni etanoolmolekulidega, esindab SCA BA50FC alkoholimõõdik stabiilset ja usaldusväärset mõõtetehnoloogiat.
- Hoiduge alkoholi tarbimisest ning suitsetamisest vähemalt 15 minutit enne mõõtmist.
- Enne kasutamist loputage suud veega.

3. Aku laadimine/Toide

- Laadige uut seadet USB DC 5,0 V allikast kasutades mikro USB juhet. (Adapter EI ole varustuses).
 - Lülitage toitelüliti ON asendisse (roheline silt).
 - Ühendage USB juhe seadme USB pesasse.
 - Laadimise ajal kuvatakse LCD ekraanile „CH“ ning märgutuli vilgub.
 - Kui aku on laetud, kuvatakse LCD ekraanile FULL (laetud).
- Kui akus ei ole testimiseks piisavalt energiat, aku märgutuli vilgub. Sellisel juhul laadige aku viivitamatult.

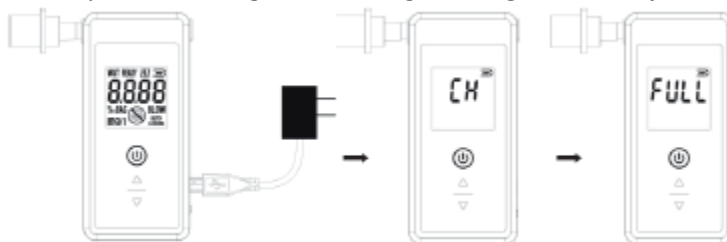

4. Kirjeldus

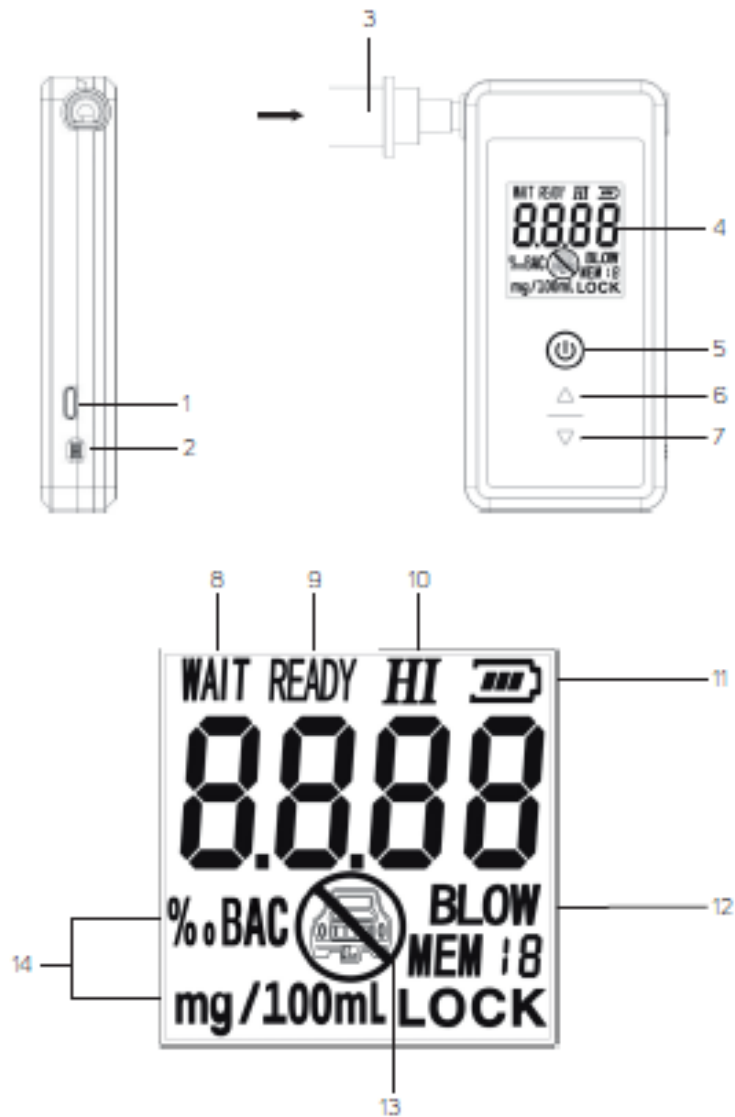

1. USB PESA
2. Toite nupp
3. Huulik
4. LCD kuva
5. ON/OFF nupp
6. UP (üles) nupp
7. DOWN (alla) nupp
8. Oodake
9. Valmis
10. Alkoholi tase veres üle hoiatustaseme
11. Aku näidik
12. Puhu
13. Ära sõida
14. Ühikud


5. Kasutamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage üks kord **ON/OFF** nuppu.
- Kui LCD ekraanile kuvatakse „ALCO“, vajutage ja hoidke **ON/OFF** nuppu umbes 2 sekundit seadme väljalülitamiseks.

Testimise alustamine

- Sisestage huulik
- Kui seade on sisselülitatud, ilmub ekraanile „ALCO“. Vajutage üks kord **ON/OFF** nuppu, et andur soojeneks. Ekraanile kuvatakse „SH“ ning algab mahaloendus („SH99“ loetakse alla kuni „SH90-00“). Niipea kui seade on valmis näidise võtmiseks, kuvatakse ekraanile vaheldumisi „READY“ ja „BLOW“ ning kõlab helisignaali; seade alustab 30 sekundist mahaloendust ning sellel ajal sooritage test.
- Kui olete valmis puhuma, puhuge pidevalt huulikusse umbes 5-7 sekundit. Andur uurib hingeõhku; lõpetage puhumine, kui kuulete klõpsu ning topeltpiiksu. Kui proovi võtmine oli edukas, hakkab vilkuma „Anly“ (toimub analüüs) ja seejärel kuvatakse vastavad mõõtetulemused ekraanile. Kui puhumise aeg oli liiga lühike või õhuvoog liiga nõrk või ebapiisav, kuvatakse LCD ekraanile „FLO“.
- Võite vajutada **ON/OFF** nuppu ja teha uue testi.
- Testi tulemus kuvatakse LCD ekraanile umbes 60 sekundi pärast.

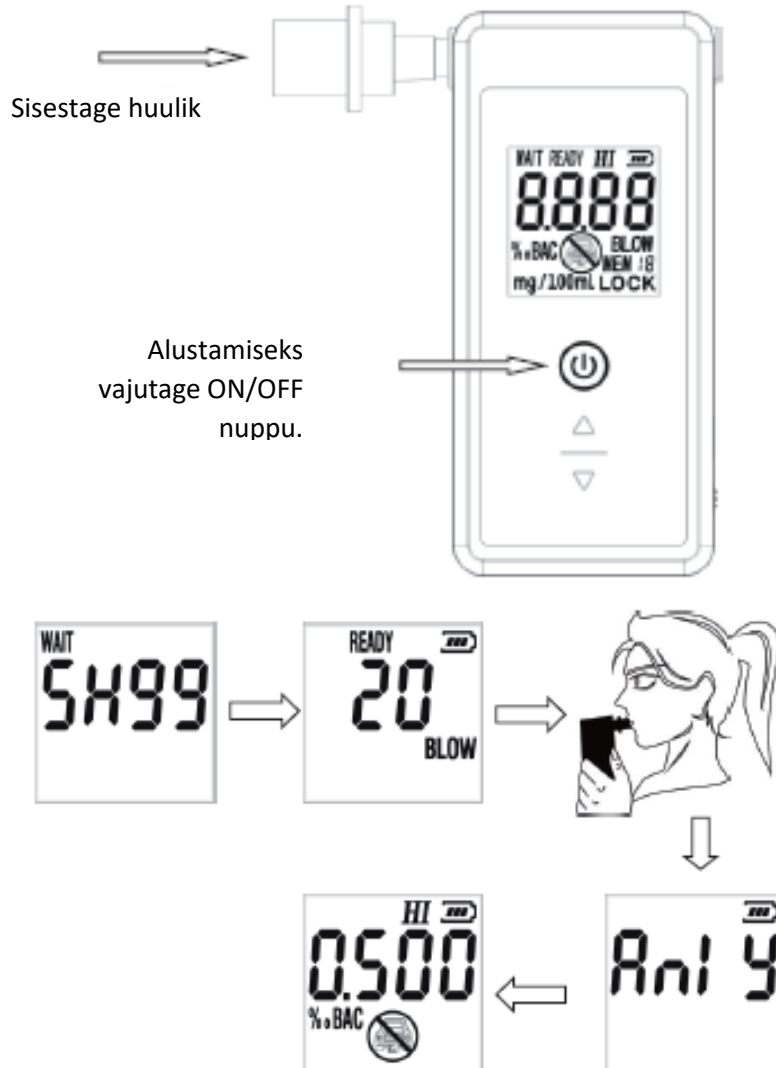

Märkus:

Kui testi tulemus ilmub ekraanile (vt ülalolevat joonist), võite vajutada „UP“ tulemuse vaatamiseks.



Olulised märkused

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta või kasutate seda madalal temperatuuril, võib soojenemise aeg olla pikem.
- Peale 5 edukat testi laske seadmel vähemalt 5 minutit puhata.
- Hoidke toodet kuivas kohas toatemperatuuril.
- Vältige äärmuslikult kõrgeid temperatuure või päikese käes hoidmist.
- Kui märgutuli vilgub, laadige aku.
- Kui kahe eduka mõõtmistulemuse erinevus on $> 0.1\%$ (0.01%), **tuleb** sooritada uus test.
- **ÄRGE UMMISTAGE** väljundit proovi võtmise ajal.
- Kui ekraanil vilgub „FLO“, siis on see liiga nõrga või katkendliku puhumise tõttu. Te võite alustada uut testi vajutades **ON/OFF** või seade läheb „ALCO“ režiimi kui „Flo“ on vilkunud u 5 sekundit.

6. Kaliibrimine

Kui testide arv saavutab maksimumi (MAX TEST), vilguvad ekraanil 500 ja „LOCK“. See on kalibreerimistuvastus - peate seadet uuesti kalibreerima, et tulemused oleksid õigesti kuvatud.



Kui soovite, et teade "LOCK" lõpetaks vilkumise ja seade oleks järgmiseks testimiseks valmis, peate tegema ühte järgmistest:

- 1) Soovitatav tegevus: Vahetage sisemine mõõtmise moodul uue eelkalibreeritud mooduli vastu. Palun võtke ühendust maaletoojaga või **SERVIS FAST, ČR, a.s. Černokostelecká 1621, Říčany, phone: +420 323 204 120, email: servis@fastcr.cz. volitatud esindusega.** Selle uue mooduli eest võetakse tasu kehtiva hinnakirja järgi.
- 2) Numbri koodi abil lähtestage oma seade, nagu on kirjeldatud Kasutaja testi peatükis.

Seadet võib kasutada uuesti 500 testiks, kuid see ei ole täpne. Seetõttu soovitame toimida vastavalt sammule 1 - vahetada moodul.

See alkotester püsib täpsena 1-aastase kasutamise vältel. Mida sagedamini te seadet kasutate, seda sagedamini vajab see kalibreerimist. Me soovitame kalibreerida seadet iga 12 kuu järel, et tagada maksimaalne täpsus.

7. Seadme lähtestamine

- 1) Lülitage seade sisse. Ekraanil näidatakse ALCO.



- 2) Selles režiimis vajutage ja hoidke üles ja alla noolenuppe ning seejärel lisage **ON/OFF** nupp. Mõni sekund neid nuppe all hoides ilmub ekraanile allolev kuva.



- 3) Kasutage üles nuppu esimese numbri muutmiseks 1, vaadake allolevat joonist, ning oodake. Kuvatakse pärast viimast lähtestamist tehtud mõõtmiste arv.



- 4) Seejärel hoidke all **ON/OFF** nuppu 3 sek ja seade lähtestatakse. Seade lülitub automaatselt algkuvale ning te võite selle kasutamist jätkata.



8. Tehnilised näitajad

Mõõtmisvahemik:	0,00 - 4,00‰ BAC (vere alkoholisisaldus)
Mõõtühikud:	‰ BAC (promilli alkoholi kontsentratsioon veres)
Lahutusvõime:	0.01‰ BAC
Alkoholisisalduse hoiatus:	≥ 0.2 ‰ BAC
Täpsus:	enam kui ± 0.08 ‰ BAC hoiatuse väärtusest
Mõõtmise kestvus:	5-7 sek
Õhuvoolu kiirus:	12 l/min või kõrgem
Rõhu ja hingamise katkemise tuvastamine:	jah
Mälu:	20 mõõtmist
Automaatne väljalülitus:	30 sek (ekraan), 2 minutit (seade)
Vooluallikas:	sisseehitatud 3.7 V, 250 mAh liitiumioonid
Mõõtmed (K x L x S):	110 x 53 x 19 mm
Seadme kaal:	82 g
Tarvikud:	3 huulikut, USB juhe, kasutusjuhend

Pakend sisaldab:

Alkomeeter
2 x huulikut
USB laadimiskaabel
Kasutusjuhised

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata. Originaalversioon on tšehhi keeles.